



4-Channel Timer

Cat. # 86-TMR-4

- Four independent countdown/count-up timers (T1–T4) with clock and alarm functions can run simultaneously; each has its own flashing indicator.
- Automatic count-up begins when a countdown reaches zero.
- Includes clock mode, 12/24-hour format, memory recall, and 1-minute buzzer alarm.

Clock Mode

- Enter Clock Mode: Press CLOCK. Time and flashing colon will display.
- Toggle 12/24hr Format: Hold START/STOP for 3 seconds.

Set Clock Time:

- Hold CLOCK for 3 seconds (until beep).
- "HOUR", "MINUTE", "SECOND" flash on display. "P" appears for PM in 12hr mode.
- Adjust using HOUR, MINUTE, SECOND (hold to fast set).
- Press the SECOND button to reset seconds:
 - If 00–29: resets to 00.
 - If 30–59: resets to 00 and adds 1 minute.
- Press CLOCK again to confirm and exit.



Minuterie à 4 canaux

Cat. # 86-TMR-4

- Quatre minuteries (T1–T4) avec compte à rebours/chronomètre, horloge et alarme, fonctionnent en même temps. Chaque minuterie a un voyant clignotant, compte progressif démarre à 0.
- Inclut : mode horloge, format 12/24h, rappel mémoire, alarme 1 min.

Mode Horloge

- Accéder au mode horloge : Appuyez sur CLOCK. L'heure et les deux-points clignotants s'afficheront.
- Changer le format 12/24h : Maintenez START/STOP pendant 3 secondes.

Régler l'heure

- Maintenez CLOCK pendant 3 secondes (jusqu'au bip).
- "HEURE", "MINUTE", "SECONDE" clignotent à l'écran. "P" apparaît pour PM en format 12h.
- Ajustez avec HEURE, MINUTE, SECONDE (maintenez pour avancer rapidement).
- Appuyez sur le bouton SECONDE pour réinitialiser les secondes :
 - Si entre 00–29 : remise à 00.
 - Si entre 30–59 : remise à 00 et ajoute 1 minute.
- Appuyez de nouveau sur CLOCK pour confirmer et quitter.

Multi-Timer Function

- All four timers (T1–T4) can run simultaneously.
- While running, each timer's indicator flashes.
- At completion, the buzzer will sound and, the corresponding indicator flashes slower.

Countdown Timer (T1–T4)

- Press T1, T2, T3, or T4 to select a timer. Indicator appears on display
- Set time using HOUR, MINUTE, SECOND (hold for fast set).
- To clear:
 - Press CLEAR to reset timer and memory to 00:00:00.
 - Or press HOUR + CLEAR, MINUTE + CLEAR, or SECOND + CLEAR to reset digits individually.

Start/Stop Countdown

- After time setting is ready, press START/STOP to begin countdown (1-sec resolution).
- Press again to stop/resume.
- When timer reaches 0:00:00:
 - Buzzer sounds
 - Corresponding indicator flashes slower.
 - Automatic count-up begins.
 - If multiple timers reach 0:00:00, all indicators flash slower, but only the displayed timer sounds.
- Press any button to stop alarm and count-up.

Memory Recall

- Press START/STOP to recall previous timer setting.
- Press again to start with recalled setting.

Fonction Multi-Minuterie

- Les quatre minuteries (T1–T4) peuvent fonctionner en même temps.
- En cours d'utilisation, l'indicateur de chaque minuterie clignote.
- À la fin du compte à rebours, le signal sonore retentit et l'indicateur correspondant clignote plus lentement.

Minuterie à Rebours (T1–T4)

- Appuyez sur T1, T2, T3 ou T4 pour sélectionner une minuterie. L'indicateur s'affiche à l'écran.
- Réglez le temps avec HEURE, MINUTE, SECONDE (maintenez pour avancer rapidement).
- Pour réinitialiser :
 - Appuyez sur CLEAR pour remettre la minuterie et la mémoire à 00:00:00.
 - Ou appuyez sur HEURE + CLEAR, MINUTE + CLEAR ou SECONDE + CLEAR pour remettre chaque unité séparément.

Démarrer/Arrêter le Compte à Rebours

- Après avoir réglé l'heure, appuyez sur START/STOP pour commencer le compte à rebours (précision à la seconde).
- Appuyez de nouveau pour arrêter ou reprendre.
- Lorsque la minuterie atteint 0:00:00 :
 - Le signal sonore retentit
 - L'indicateur correspondant clignote plus lentement
 - Le compte progressif automatique débute
 - Si plusieurs minuteries atteignent 0:00:00, tous les indicateurs clignotent plus lentement, mais seul le minuteur affiché déclenche le son.
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme et le compte progressif.

Stopwatch Mode (Count-Up)


- In timer mode, press CLEAR to reset to 00:00:00.
- Press START/STOP to start/stop count-up (1-sec resolution).
- Max time: 99:59:59 → then auto-restarts from 00:00:00.

Placement Options

- Clip: Attach to board or pocket.
- Magnet: Stick to metal surfaces.
- Stand: Flip out rear metal stand for tabletop use.

Battery Replacement

- Turn timer over. Use a coin to open battery cover.
- Replace with 1 × 3V CR2032 (positive '+' facing up).
- Dispose of used battery according to local regulations.

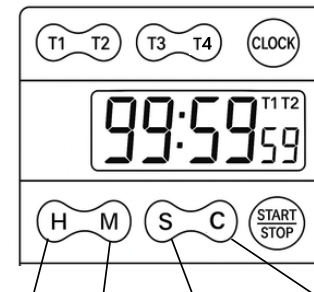

HOUR MINUTE SECOND CLEAR

Distributed by Ultident Scientific | ULTIDENT.COM

Rappel Mémoire

- Appuyez sur START/STOP pour rappeler le dernier réglage.
- Appuyez de nouveau pour démarrer avec le réglage rappelé.

Mode chronomètre (progressif)


- CLEAR pour réinitialiser, START/STOP pour démarrer/arrêter.
- Max 99:59:59, puis redémarre à zéro.

Options de Placement

- Clip : Fixez à une planche ou une poche.
- Aimant : Collez sur une surface métallique.
- Support : Dépliez le support pour une utilisation sur table.

Remplacement de la Pile

- Retournez la minuterie. Ouvrir avec une pièce de monnaie
- Utiliser 1 pile 3V CR2032 (+ vers le haut)
- Recycler selon les règles locales.

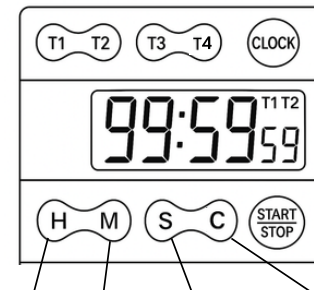

HEURE MINUTE SECONDE CLEAR

Distribué par Ultident Scientific | ULTIDENT.COM